

HIPL

QUANTIKA

dermosistemi



MADE IN ITALY
WITH LOVE

la fotoepilazione
a luce pulsata intensa

Il dispositivo **Quantika HIPL** è l'innovativa tecnologia che basa il suo funzionamento sulle proprietà di una sorgente luminosa policromatica divergente, non coerente e non collimata, che emette impulsi luminosi ad alta intensità chiamata **High Intense Pulsed Light**.

Grafica del sistema Touch Screen

Interfaccia uomo/macchina - Human Machine Interface o HMI, è il grado di interazione tra essere umano (operatore) che sta utilizzando una macchina e la macchina stessa. E' per questo che i nostri ingegneri ci mettono così tanta attenzione nel progettare soluzioni facili, efficaci, efficienti e in grado di essere usabili. In pratica mettiamo attenzione al grado di facilità e soddisfazione con cui si compie l'interazione tra professionista, macchina e paziente.




UN'EVOLUTA E MODERNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA FOTOEPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

La lampada allo xeno lineare di qualità assoluta, raffreddata a liquido con circuito sigillato, il manipolo snello e versatile per tutte le aree del corpo, la gestione software in grado di modulare l'erogazione dei J/cm^2 in maniera finissima, fanno di **Quantika** un'evoluta e moderna piattaforma tecnologica per la fotoepilazione progressiva permanente.

La modalità di emissione è estremamente sicura ed adattabile ad ogni tipologia di applicazione, dall'impulso singolo fino al treno di 3 impulsi consecutivi, con una durata variabile tra 1 e 30 ms e con la possibilità di scegliere, in pochi secondi, l'intervallo di lunghezza d'onda* più adatto al tipo di applicazione e al fototipo trattato.

IPL Broadband

EMISSIONE POLICROMATICA LUMINOSA
CON TECNOLOGIA IPL

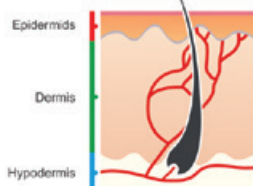

INNOVATIVO MULTIFUNZIONALE

Il dispositivo, compatto e facilmente trasportabile, è dotato di uno spot di circa 8 cm², permette di trattare tutte le regioni del corpo in modo versatile grazie anche al comando di emissione del flash posto direttamente sul manico dell'operatore alternativo al comando del pedale switch.

L'azione di **Quantika HIPL**, in un ciclo variabile di sedute, permette di ottenere risultati visibili ed esteticamente significativi nei trattamenti di fotoepilazione progressiva.

* Per la versione Plus i filtri sono 400 nm fisso e 520, 590, 620 nm aggiuntivi - Per la versione estetica i filtri sono 600 nm fisso e 650 nm aggiuntivo.

LONG LIFE LAMP

- RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
- TEMPO DI RICARICA SOTTO I 2 SECONDI
- **LAMPADA GARANTITA** 120.000 SPOT**
- EMISSIONE SINGOLA O A TRENO D'IMPULSI

VELOCE E SICURA

- COMANDI CHIARI E SEMPLICI
- TEMPI DI LAVORO VELOCI GRAZIE AL RIDOTTO TEMPO DI RICARICA

**Luce pulsata
tradizionale**

TEMPO
DI RICARICA
MEDIO

2,5"
max

QUANTIKA HIPL

TEMPO
DI RICARICA
MASSIMO 2,5"



CARATTERISTICHE

- **Sorgente:** Xenon Lamp
- **Raffreddamento:**
Liquido intercooler/circuito sigillato
- **Dimensione dello spot:** 8 cm² circa
- **Modalità di emissione:**
Impulso singolo, treno di impulsi
- **Durata impulso:**
Regolabile (burst) da 1 a 30 mS
- **Tempo di ricarica:**
Variabile da 1 a 2,5 sec.
- **Interfaccia Utente:** Touch Screen 8"
Full Colors 800x600 pixel
- **Controllo di emissione:**
Pedale e pulsante su manopola
- **Visualizzazione parziale e totale del flash emessi**
- **Durata vita della lampada:**
Valore indicativo espresso in %
- **Durata media della lampada:**
80.000 - 120.000 Shots**

CARATTERISTICHE TECNICHE HIPL QUANTIKA

- **Codice prodotto:** 604010 G
- **Lunghezza d'onda (max spectrum):**
600 ÷ 1100 nm
- **Accessori:**
Filtro 650 nm, occhiali di protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE HIPL QUANTIKA PLUS

- **Codice prodotto:** 604020 G
- **Lunghezza d'onda (max spectrum):**
400 ÷ 1100 nm
- **Fluenza:** 3,2 J/cm² ÷ 16,2 J/cm²
- **Accessori:** Filtri 520, 590, 620 nm,
cristallo convogliatore, occhiali di protezione

** ad emissione costante

HIPL QUANTIKA

Scopri l'efficacia del metodo **High Intense Pulsed Light** di **Quantika** e della sua speciale tecnologia di emissione con Lampada allo Xeno lineare, una soluzione che oggi ti permette di effettuare una fotodepilazione dolce, in maniera semplice e veloce ed in tutta sicurezza.



officinam.it

ISOPHARMA COSMETICS SRL

Factory and Administration:

Zona Industriale - 73017 **Sannicola** (LE) - Italy
Tel. +39 0833.233038 - Fax +39 0833.234203

Press and Mktg Office:

Via M. Prestinari, 3 - 20158 **Milano** - Italy

www.dermosistemi.com

numero verde **800 911525**

DISTRIBUITO DA

